



AIR:MASTER

Zwischen- und Abschlusstrocknung flexibler Endoskope

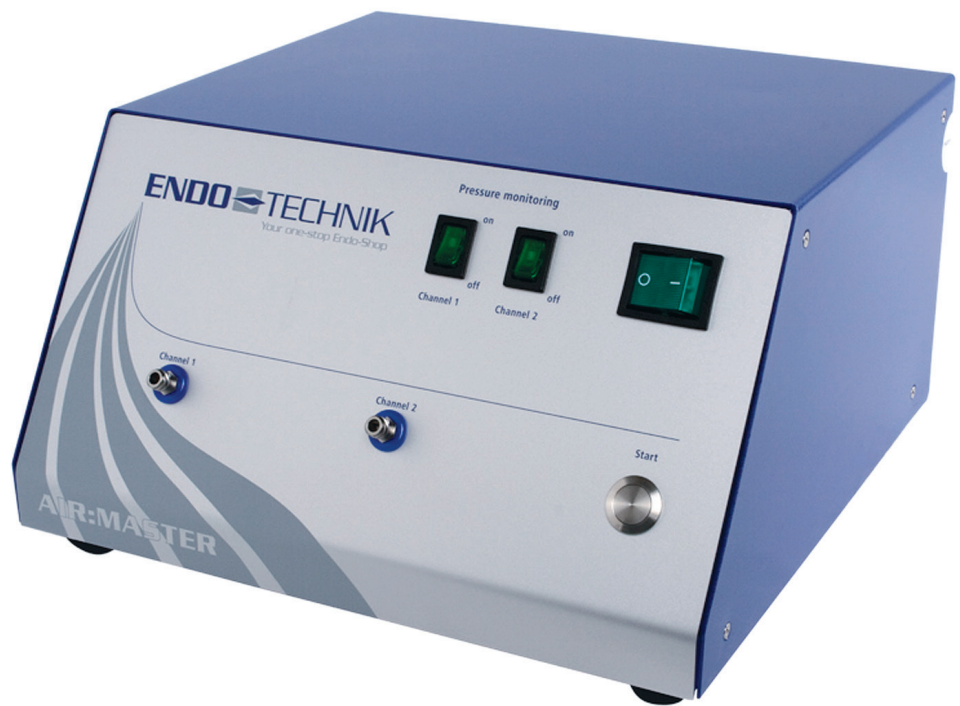

AIR:MASTER

Zwischen- und Abschlusstrocknung flexibler Endoskope

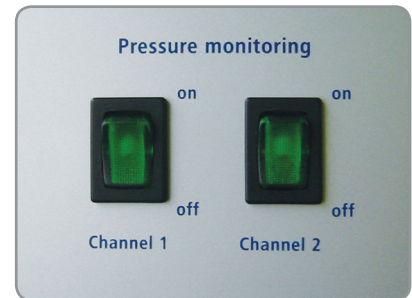

Drucküberwachung

Die praktikable und kompakte Lösung für den sicheren Aufbereitungsprozess

Der AIR:MASTER dient der Zwischen- und Abschlusstrocknung nach erfolgter Aufbereitung von wasserdichten, flexiblen Endoskopen. Die Endoskope der Marken OLYMPUS, Storz, FUJINON und PENTAX können mit entsprechender Adaptierung getrocknet werden. Zum Schutz der Kanäle (max. Arbeitsdruck unter 0,8 bar) ist eine Drucküberwachung im Gerät eingebaut. Über zwei manuelle Schalter lässt sich die Drucküberwachung komfortabel ein- oder ausschalten. Zwei Gassterilfilter ermöglichen die sichere Trocknung mit steriler Luft und nach 20 Minuten Trocknung schaltet das Gerät automatisch ab.

Technische Daten

Netzanschluss:	230 V
Netzfrequenz:	50 Hz
maximale Leistungsaufnahme:	115 VA
maximale Stromaufnahme:	0,5 A Schutzklasse I
Höhe / Breite / Tiefe:	150 x 280 x 300 mm
Gewicht:	ca. 7 Kg
Max. Staudruck:	0,8 bar
Betriebsbedingung Umgebungstemperatur:	10° C bis 35° C
Betriebsbedingung rel. Luftfeuchte:	max. 70%
Klassifizierung gem. EG-RL 93/42/EWG:	Ila (Regel 15, EG-RL 93/42/EWG, Anhang IX)
Art des Schutzes gegen elektrischen Schlag:	Gerät der Schutzklasse 1, Typ BF
Sicherung:	5 x 20 mm T 800 mA, IEC 127 (2 Stück)
Elektrische Sicherheit entspricht:	EN 60601-1, EMV entspricht EN 61320-1, EN 61000-3, EN 61000-4

AIR:MASTER

Artikel-Nr.

7000-K01

Lieferumfang

Endokompressor mit Drucküberwachung, 1 x AIR:MASTER Schlauch-Anschluss-Set mit Nylon LL für alle gängigen, flexiblen Endoskope, 1 x Netzkabel mit 2 m Länge, 2 Bedienungsanleitungen

Blaspistole für AIR:MASTER ist separat zu bestellen

AIR:MASTER

Anwendungsbeispiel für die Trocknung flexibler Endoskope



Anwendung der Blaspistole am Biopsiekanal

Die Blaspistole dient primär der äußerlichen Trocknung von Ventilschächten und Kanalanschlüssen an flexiblen Endoskopen.


Zubehör



7000-BP-001 Blaspistole für AIR:MASTER



11-2000 Gassterilfilter für AIR:MASTER

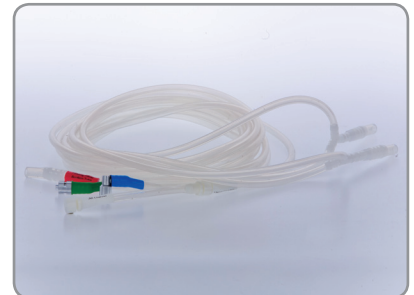

7050-NS0 Standard Anschluss-Set



AIR:MASTER ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Zubehör
7000-BP-001	Blaspistole für AIR:MASTER
11-2000	Gassterilfilter für AIR:MASTER (Standzeit 4 Wochen)
7050-NS0	AIR:MASTER Schlauch-Anschluss-Set mit Nylon LL für alle gängigen flexiblen Endoskope der Marken Olympus, Storz sowie Penatx und Fujinon
7051-NS0	AIR:MASTER Schlauch-Anschluss-Set mit Nylon LL für alle gängigen flexiblen Endoskope, für AIR:MASTER bis Seriennummer 347



Wagenprogramm



Endoskopie Zubehör
Krankenhaus- und Praxisausstattung



Elektrisches Zubehör
Krankenhaus- und Praxisausstattung



Flexibles Zubehör

ENDO-TECHNIK W. Griesat GmbH
Heiligenstock 32
42697 Solingen
Germany

Tel.: +49 (0)212 / 267 43-0
Fax: +49 (0)212 / 267 43-50

E-Mail: info@endo-technik.de
Internet: www.endo-technik.de

CE
2013.07